

新版"解码基因"操作指引

2019年



专为您设计的更新

这一年来,我们听取了您的反馈并对您的基因组报告问题予以重视。因此,在本次改版中,我们通过 更细致的**解读分类、更新知识库升级解读内容、升级搜索功能,增加一键分享和支持多成员查看报告**等功能,希望以此提升您在查阅和理解报告的体验感。

若要进一步了解我们为整理您的基因组报告所做的努力,以及为我们提供更多反馈,欢迎联系我们! 下面,请我们一起扫一扫右下角二维码,"进入BGE",并打开"解码基因",开启探索之旅!

微信公众号二维码 =>>>>

BGE公邮: bgi-mygenome@genomics.cn





1. 遗传性疾病

- 更新了变异位点知识库,阳性结果可能会有变化;
- 新版报告可完整查看每一种检测到的遗传病参与解读的位点信息,以及自己的基因型。

Q&A→

Q: 为什么旧版"共检测2074项";新版只有"检测253项"?

A: 是的,为了让您更方便快捷地查阅、更容易理解报告内容,我们对这部分做了调整。

旧版"共检测2074项",是指检测到的所有遗传疾病的**基因位点数**; 新版"检测253项",是指检测到的所有**遗传疾病数**。

Q: 遗传疾病中, "XX项需要关注" 要如何快速查看是什么疾病?

A: 点击最下方【查看全部】进入后,选择<u>"按影响机制"</u>即可获取具体 "影响您和后代"及"仅影响后代"的疾病类型。





遗传性疾病(共检测2074项)

5个阳性突变位点

After:

遗传疾病 检测253项, 5项需要关注



肿瘤相关 检测11项



老年病检测5项



眼病 检测26项



皮肤病检测17项



消化系统疾病检测2项



生殖与性发育异常 检测1项



<u>血液病</u> 检测10项



耳聋相关 检测18项



呼吸系统疾病 检测1项

查看全部



Q&A→

Q: 如何查看遗传病参与解读的位点信息,以 及自己的基因型?

A: 以 常染色体显性耳聋2B型 为例。

点击进入该病的具体信息,包括疾病简介、结 果解读和检测基因。

进入**检测基因**(右图1下方),可见该病检测的基因是GJB3,以及测到的坐标和rs编号,您的基因型结果等。

(本报告中任意项目均可按同一操作查询检测基因结果。您最想知道自己在哪个疾病或特征上的基因型呢?立即进入BGE尝试此功能吧。)







2. 用药指南

- 以生活场景对药物分类;
- 更多药物信息展示(例如:商 品名、药物相互作用、不良反 应等)。

Q&A→

Q: 检测项这么多, XX项需要关

注,可从哪里快速获取?

A: 请点开具体的用药模块,通

过"筛选"相应的用药建议,

即可获得需重点关注的药物信息。



Before:



个体化用药(共检测125项)

56个药物需要关注

After:





3. 个体特征

可看到特定特征的人群分布情况, BGE平台上有多少用户与您相似。

Q&A→

Q: 个体特征结果挺有趣的,如何快速美观地分享给其他人或发票圈?

A: 是的,新版已实现分享功能。有两种方式,可见右图。本报告中任意结果均可按同一操作分享。

(点击分享后出现什么呢?立即进入BGE试一试!)。

点击分享❷ ◎ 先天爆发力 · 爆发力素质是指骨骼肌在高速状态下输出力的能 是杰出运动能力的一个重要方面 ·95%的顶级运动员ACTN3基因有相同等位基因 基因结果 36.20%的用户与你相似 • 42.94% 中 9 20.86% 弱 ● 36.20% 强 击点 F0-分享 检测基因 结果解读 项目简介 分享


Before:



个体特征(共检测53项)

53个特征已经解锁

After:

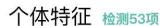











饮酒能力 检测3项



易胖风险检测7项



生活习惯 检测9项



外形特征 检测5项



抵抗力 检测7项



4. 健康风险

- 即旧版中"复杂疾病"模块;
- 知识库更新,现只保留常见的5种疾病;
- 原检测结果中包含的鼻咽癌、膀胱癌、系统性红斑狼疮等其他12项,疾病模型需进一步优化,后期若有新结果再上线;
- 增加 "人群发病率"展示,如右 图。

2型糖尿病



- · 一种最常见的内分泌代谢疾病
- · 是由遗传因素和环境因素共同参与导致的复杂疾病
- · 特征为高血糖,典型临床表现为多尿症、多饮症 及多食症

基因结果

正常风险

平均人群的 0.37 倍

人群发病率

每1万个与您相同年龄、性别的中国人里出现300 例患此疾病











结果解读





检测基因

Before:



复杂疾病(共检测17项)

5个遗传风险上升

After:





5. 更多功能升级

除了报告内容更丰富,新增分享功能外, 解码基因还有更多更流畅的功能,提升用 户的操作体验。

(1) 升级"搜索"功能

- 全面升级搜索功能,提供更流畅地操作体验,更清晰的信息展示。
- 搜索内容涵盖了您的检测报告、相 关应用、全基因组范围内rs位点信 息、BGE平台科研项目的检索。



(您想了解更多信息吗?请试一试"搜索",输入疾病名称、关键字、 基因位点······)



(2) 支持多家庭成员报告查看

- 支持在您的账号绑定年长的父母或年幼的子女基因组报告套件,帮助他们查阅基因组报告;
- <u>若家属在BGE平台上有全基因组数据但不</u> <u>确定套件编码,可联系我们协助查询。</u>







查看步骤如图所示



(3) 新增使用指南

新增"遗传疾病、个体特征、用药指南、健康风险"4个模块的使用指南,帮助您更好地了解、使用基因组报告。







若您在使用过程中遇到其他问题,请随时联系我们!

BGE公邮: <u>bgi-mygenome@genomics.cn</u>

